




Kurzanleitung für RotoBed®Free

Um die Funktionen des Bettes individuell einzustellen, z. B. das Anheben der Rückenlehne, verwenden Sie die Pfeiltasten links/rechts ←/→, um die Funktion zu finden, die Sie einstellen möchten. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Pfeiltasten ↑/↓, um das Bett einzustellen. Die Bewegung stoppt immer, wenn die Taste losgelassen wird. Die Taste **SITZPOSITION**  bewirkt, dass sich das Bett in der gespeicherten Betthöhe und im Neigungswinkel in die Ausstiegsposition dreht.

Die Taste **LIEGEPOSITION**  bewirkt, dass sich das Bett dreht, bis die Liegefläche ganz in die Horizontale gedreht ist.

Die **Store-Taste**  dient zum Speichern von Lieblingspositionen. Siehe Anweisungen unten.

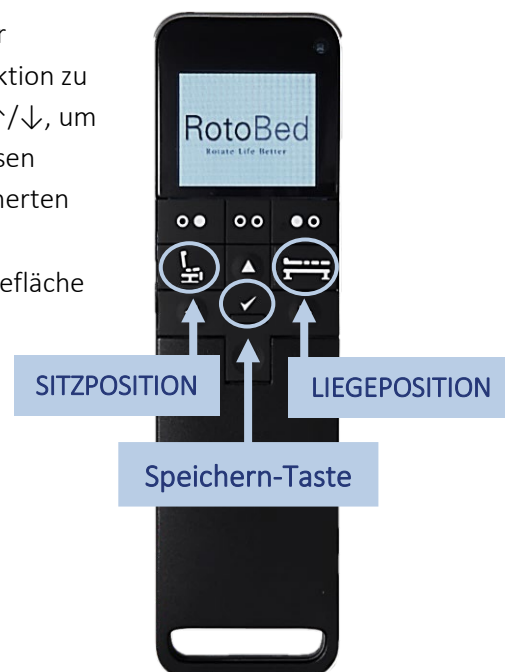


TIPP: Sie können die Fersen entlasten, indem Sie das Beinteil etwas anheben. Dadurch verteilt sich der Druck auf Ihren Unterschenkel und Ihre Fersen heben sich leicht von der Matratze ab.

Einsteigen




Schieben Sie sich so weit wie möglich in den Sitz zurück, um den besten Komfort zu erzielen. Die Standard-Sitzhöhe ohne Matratze beträgt 32 cm über dem Boden. Die optimale Sitzhöhe ist erreicht, wenn die gesamte Fußfläche auf dem Boden aufliegt, ohne das Gewicht Ihrer Beine zu tragen. Finden Sie „BETHÖHE“ mit der Pfeiltaste nach rechts. Finden Sie Ihre bevorzugte Ausstiegshöhe mit den Pfeiltasten ↑/↓.

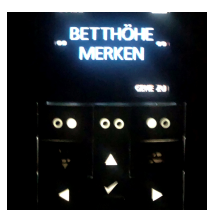


Drücken Sie dreimal die Pfeiltaste nach rechts, um „BETHÖHE MERKEN“ auszuwählen. Halten Sie die Speichertaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Rückenneigung beim Drehen

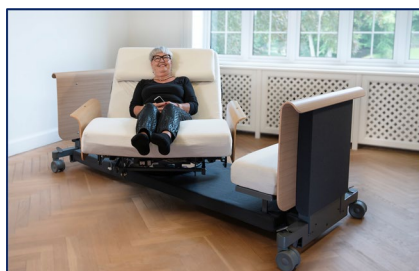


Es ist wichtig, dass Sie bequem sitzen, ohne Druck auf die Bauchregion auszuüben, während sich das Bett dreht. Die Standardneigung bei Lieferung beträgt 45°. Die Neigung kann auf einen Winkel von 35° bis 65° eingestellt werden. Außerhalb dieses Bereichs gibt das Bett einen Alarmton von sich. Gehen Sie zur "RÜCKEN". Stellen Sie die gewünschte Neigung mit den Pfeiltasten ↑/↓ ein.

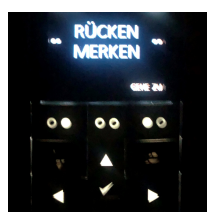

Drücken Sie viermal die Pfeiltaste nach rechts, um die Option „RÜCKEN MERKEN“ zu finden. Halten Sie die Speichertaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Aufsteigen

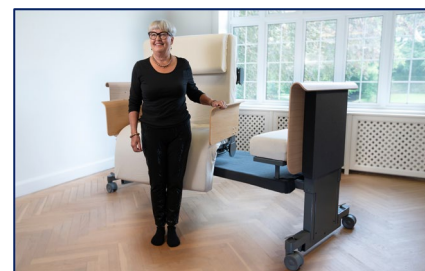



Halten Sie die Taste **SITZPOSITION** gedrückt, bis das Bett in der Ausstiegsposition stoppt. Wenn die Bewegung stoppt, können Sie die Taste loslassen und erneut drücken. Dadurch bewegt das Bett die Rückenlehne das letzte Stück nach vorne, woraufhin das Bett beginnt, sich in der Höhe zu bewegen. Das erleichtert den Aufstieg. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die Bewegung. Durch Drücken der Taste **LIEGEPOSITION** fährt das Bett zurück in die Ausgangsposition und ist somit bereit für den nächsten Einstieg.



Der Ausstiegswinkel ist standardmäßig so eingestellt, um den Übergang in einen Rollstuhl oder Rollator zu erleichtern. Für einen senkrechten Austrittswinkel, finden Sie „EXIT WINKEL“ und halten Sie die Speichertaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Montage die Bettgittern


RotoBed®Free Pflegebetten können mit Bettgittern aus Metall oder Eichenfurnier geliefert werden. Unabhängig vom Material werden die Bettgitter in der gleichen Weise montiert und entfernt:

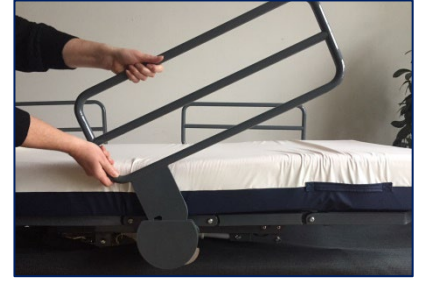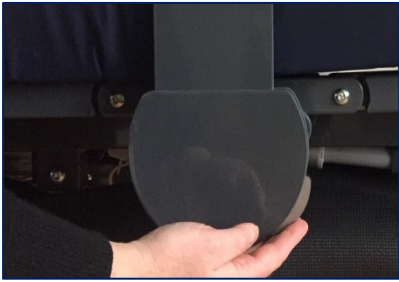

Zum Herausnehmen wird die kleine Taste am Halter des jeweiligen Bettgitters gedrückt, während das Bettgitter in einer schrägen Stellung nach oben herausgezogen wird. Die Bettgitter können einfach wieder eingesetzt werden und verschließen sich automatisch.

Hinweis: Die Bettgitter müssen entweder montiert oder entfernt werden. Lassen Sie sie nicht senkrecht in der Halterung stehen. Dies kann zu Quetschgefahr und Schäden am Bett während der Drehung führen.

Montage der Matratze

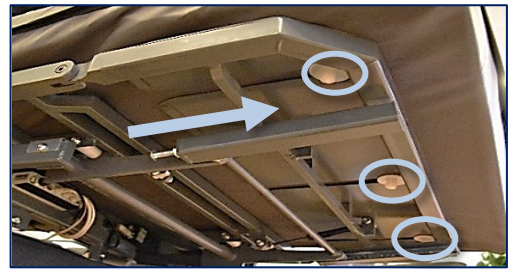


Bewegen Sie das Fußende mit der Fernbedienung in die höchste Position. Falten Sie die Matratze in der Mitte und legen Sie sie so hin, dass die drei Matratzenhalterungen an der Öffnung für die 3 Nuten am Beinteil platziert werden. Es ist wichtig, dass sich sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Metallplatte eine Nylonscheibe befindet. Ziehen Sie dann die Matratze in Richtung Fußende, sodass alle drei Matratzenhalterungen auf den Boden der Rillen gleiten. Bewegen Sie die Liegefläche mit der Fernbedienung vollständig in die Waagerechte.

Schieben Sie die Matratzenhalterung in der Mitte der Unterseite der Matratze (auf jeder Seite eine) in das Loch in der Liegefläche. Es ist wichtig, dass sich sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Metallplatte eine Nylonscheibe befindet. Dies wird durch Drücken auf die Matratze gewährleistet, während die Matratze zur Seite gezogen wird. Die beiden Matratzenaufsätze der Fußmatratze werden nach unten in die beiden Rundlöcher in der Liegefläche des Fußteils gedrückt.

Räder und Bremsen

Standardmäßig ist das Bett mit integrierten Tente Linea Doppelrädern ausgestattet. Die Räder sind drehbar. Die Bremsen arbeiten paarweise und können von beiden Seiten des Bettes bedient werden.

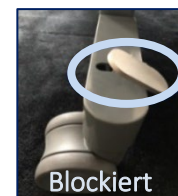

Hinweis: RotoBed®Free sollte nicht von Personen ohne Einweisung verwendet werden. Das Bett ist nach den neuesten gültigen Normen und Regeln für Pflegebetten geprüft. RotoBed®Free sollte ausschließlich mit der Fernbedienung betrieben werden. Beachten Sie, dass sich keine Kinder oder Tiere unter dem Bett befinden, wenn die Bettteile eingestellt sind. Wenn der Beinteil des Bettes angehoben ist, belasten Sie ihn nicht mit schweren Gegenständen oder Personen. Das Bett muss von den Benutzern innerhalb der folgenden Kriterien verwendet werden: Gewicht 40-190 kg. Höhe \geq 146 cm. BMI \geq 17.



Um auf das vollständige Handbuch zuzugreifen, scannen Sie bitte den QR-Code.