




Um die Funktionen des Bettes individuell einzustellen, z. B. das Anheben der Rückenlehne, verwenden Sie die Pfeiltasten links/rechts ←/→, um die Funktion zu finden, die Sie einstellen möchten. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Pfeiltasten ↑/↓, um das Bett einzustellen. Die Bewegung stoppt immer, wenn die Taste losgelassen wird.


Die Taste **SITZPOSITION**  bewirkt, dass sich das Bett in der gespeicherten Betthöhe und im Neigungswinkel in die Ausstiegsposition dreht.

Die Taste **LIEGEPOSITION**  bewirkt, dass sich das Bett dreht, bis die Liegefläche ganz in die Horizontale gedreht ist.

Die **Store-Taste**  dient zum Speichern von Lieblingspositionen. Siehe Anweisungen unten.

Wenn die drahtlose Fernbedienung nicht verwendet wird, empfehlen wir, sie in der Halterung an einem Bettgitter zu platzieren.


TIPP: Sie können die Fersen entlasten, indem Sie das Beinteil etwas anheben. Dadurch verteilt sich der Druck auf Ihren Unterschenkel und Ihre Fersen heben sich leicht von der Matratze ab.

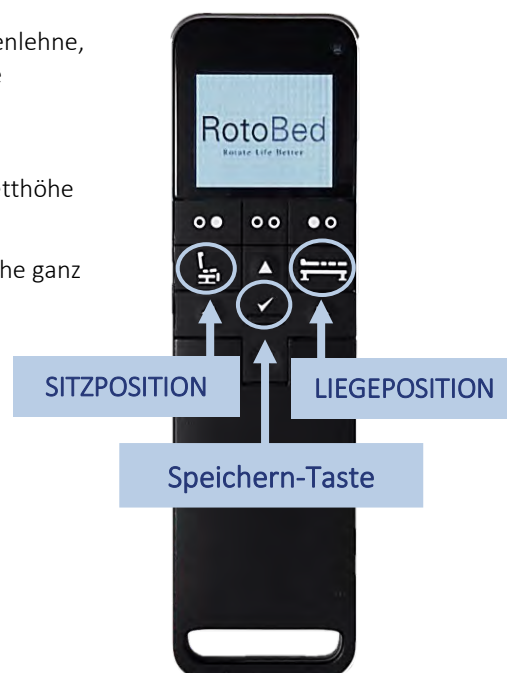

Einsteigen



Schieben Sie sich so weit wie möglich in den Sitz zurück, um den besten Komfort zu erzielen. Die Standard-Sitzhöhe ohne Matratze beträgt 32 cm über dem Boden. Die optimale Sitzhöhe ist erreicht, wenn die gesamte Fußfläche auf dem Boden aufliegt, ohne das Gewicht Ihrer Beine zu tragen. Suchen Sie **BETHÖHE** mit der rechten Pfeiltaste. Finden Sie Ihre bevorzugte Austrittshöhe mit den Pfeiltasten ↑/↓.

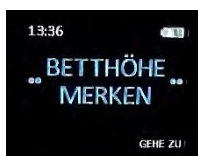

Klicken Sie dreimal auf die rechte Pfeiltaste, um **BETHÖHE MERKEN** zu finden. Halten Sie die Speichertaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Rückenneigung beim Drehen



Es ist wichtig, dass Sie bequem sitzen, ohne Druck auf die Bauchregion auszuüben, während sich das Bett dreht. Die Standardneigung bei Lieferung beträgt 45°. Die Neigung kann auf einen Winkel von 35° bis 65° eingestellt werden. Außerhalb dieses Bereichs gibt das Bett einen Alarmton von sich. Gehen Sie zu **RÜCKEN**. Finden Sie die gewünschte Neigung mit den Pfeiltasten ↑/↓.



Klicken Sie viermal auf die rechte Pfeiltaste, um **RÜCKEN MERKEN** zu finden. Halten Sie die Speichertaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Aufsteigen



Halten Sie die Taste **SITZPOSITION** gedrückt, bis das Bett in der Ausstiegsposition stoppt. Wenn die Bewegung stoppt, können Sie die Taste loslassen und erneut drücken. Dadurch bewegt das Bett die Rückenlehne das letzte Stück nach vorne, woraufhin das Bett beginnt, sich in der Höhe zu bewegen. Das erleichtert den Aufstieg. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die Bewegung. Durch Drücken der Taste **LIEGEPOSITION** fährt das Bett wieder in die Ausstiegsposition und ist somit bereit für den nächsten Einstieg.



Suchen Sie für den senkrechten Austrittswinkel den **EXIT WINKEL** und drücken Sie die Speichertaste 5 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören.

Montage die Bettgittern


RotoBed®Change Pflegebetten können mit Bettgittern aus Metall oder Eichenfurnier geliefert werden. Unabhängig vom Material werden die Bettgitter in der gleichen Weise montiert und entfernt:



Zum Herausnehmen wird die kleine Taste am Halter des jeweiligen Bettgitters gedrückt, während das Bettgitter in einer schrägen Stellung nach oben herausgezogen wird. Die Bettgitter können einfach wieder eingesetzt werden und verschließen sich automatisch.

Hinweis: Die Bettgitter müssen entweder montiert oder entfernt werden. Lassen Sie sie nicht senkrecht in der Halterung stehen. Dies kann zu Quetschgefahr und Schäden am Bett während der Drehung führen.

Montage der Matratze

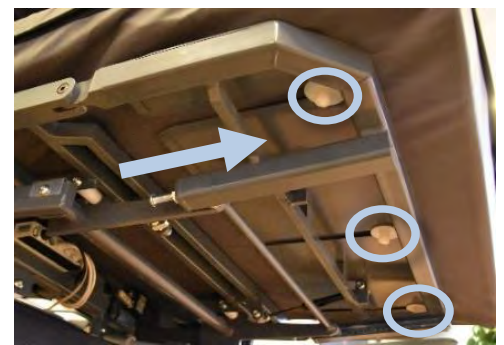

Bewegen Sie das Fußende mit der Fernbedienung in die höchste Position. Falten Sie die Matratze in der Mitte und legen Sie sie so hin, dass die drei Matratzenhalterungen an der Öffnung für die 3 Nuten am Beinteil platziert werden. Es ist wichtig, dass sich sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Metallplatte eine Nylonscheibe befindet. Ziehen Sie dann die Matratze in Richtung Fußende, sodass alle drei Matratzenhalterungen auf den Boden der Rillen gleiten. Bewegen Sie die Liegefläche mit der Fernbedienung vollständig in die Waagrechte.

Schieben Sie die Matratzenhalterung in der Mitte der Unterseite der Matratze (auf jeder Seite eine) in das Loch in der Liegefläche. Es ist wichtig, dass sich sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Metallplatte eine Nylonscheibe befindet. Dies wird durch Drücken auf die Matratze gewährleistet, während die Matratze zur Seite gezogen wird. Die beiden Matratzenaufsätze der Fußmatratze werden nach unten in die beiden Rundlöcher in der Liegefläche des Fußteils gedrückt.

Hinweis: RotoBed®Change sollte nur von Personen verwendet werden, die eine Einführung in die Benutzung des Bettes haben. Das Bett ist nach den neuesten gültigen Normen und Regeln für Pflegebetten geprüft. RotoBed®Change sollte ausschließlich mit der Fernbedienung betrieben werden. Beachten Sie, dass sich keine Kinder oder Tiere unter dem Bett befinden, wenn die Bettteile eingestellt sind. Wenn der Beinteil des Bettes angehoben ist, belasten Sie ihn nicht mit schweren Gegenständen oder Personen. Benutzergewicht 40 - 135 kg.



Um das vollständige Handbuch zu lesen, scannen Sie bitte den QR-Code.